

STEEMA

DUAL TOT SLING SYSTEM

Сравнение слинговых систем

	TVT-O (Gynecare)	Obtryx II (Boston Scientific)	STEEMA (Promedon)
Толщина	0.63 mm ¹	0.66 mm ¹	0.5 mm ³
Диаметр пор	0.15 mm ¹	0.15 mm ¹	0.14 mm ³
Плотность	100 ¹	100 ¹	90 ³
Максимальное натяжение	70 N ¹	70N ¹	90 N ³
Разрешенная нагрузка	1,11 Kg ⁴	0,73 Kg ²	0,77 Kg ⁴
Усилие при проколе	1,6 ⁴ Nm	1,16 ⁴ Nm (Halo needle)	1,15 ⁴ Nm

Информация для заказа


STEEMA Трансобтураторная слинг-система

Код продукта: KIT-STEEMA-T PLUS

- 1 | Слинг STEEMA
- 2 | Иглы STEEMA
- 1 | Уретральный протектор



(495)921-30-88
info@mpamed.ru
www.mpamed.ru
www.promedon.ru

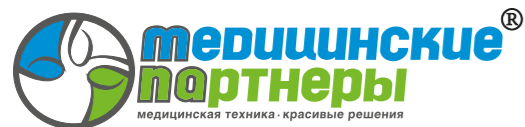


www.promedonproducts.com/steema

CE 0197 В-30-76(02)/10-FEB-2018

STEEMA

DUAL TOT SLING SYSTEM

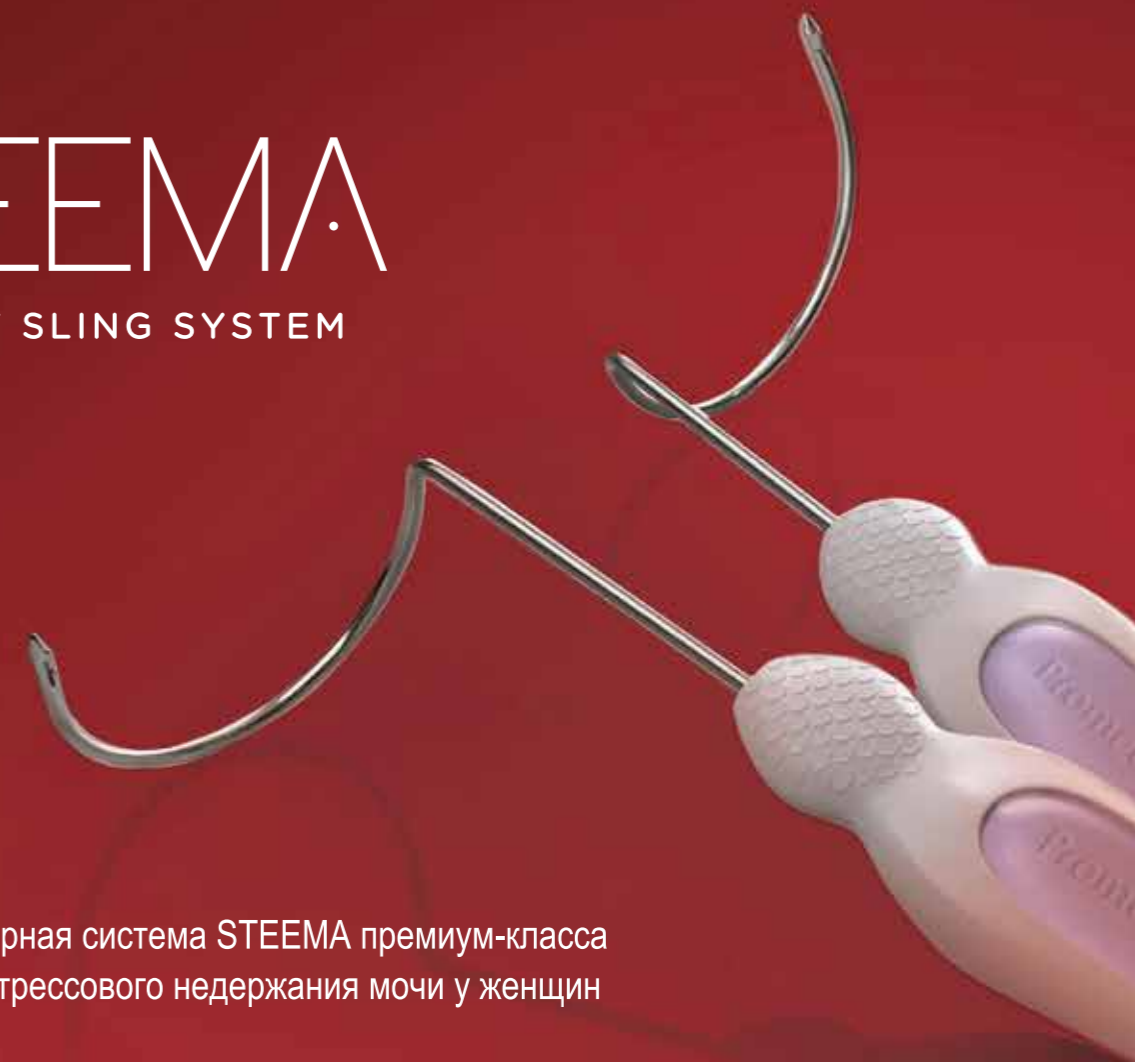

Трансобтураторная система STEEMA премиум-класса для лечения стрессового недержания мочи у женщин



**Двойной
подход**

**Простота
установки**

**Низкая
эластичность**

Promedon
People + Innovation

Трансобраторная система STEEMA премиум-класса для лечения стрессового недержания мочи у женщин. Разработана для техники установки in-out и out-in.

Уменьшенный диаметр иглы

Приводит к минимальному повреждению ткани и обеспечивающий плавный ход

Т-образное ушко

Рукоятка

Эргономичный дизайн обеспечивает точное, контролируемое движение руки

НА 30% МЕНЬШЕ
усилие при проколе¹

Полипропеленовая сетка типа I

Термообработанные края обеспечивают лучшую поддержку. Сетка с низкой эластичностью.

Часть оболочки с меньшим диаметром

Для плавного проведения сетки.

Защитная оболочка

Минимизирует трение и повреждение тканей при установке.

Уретральный протектор

Эргономичная рукоятка. Отметка введения.

Центральный ярлык

Обеспечивает контролируемую и легкую установку сетки. Съемный.